

# **BLIMO 50**

## **ANVÄNDARMANUAL**



**BLIMO**  
**HJÄLPMEDEL**

# INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Fordonsöversikt .....	1
Före användning .....	2
Frikoppling.....	3
Batterier och laddare .....	4
Att köra din Blimo .....	5
Inställningar .....	6
Underhåll .....	7-8
Felsökning .....	9
Kontaktuppgifter .....	10

# FORDONSÖVERSIKT



# FÖRE ANVÄNDNING

När din Blimo levereras är den till allra största delen monterad. Emballaget som fordonet levereras i kan med fördel vikas ihop och sparas om du någon gång i framtiden skulle behöva skicka fordonet någonstans. Lådan är även ett bra skydd vid långtidsförvaring.

## ANSLUTNING AV BATTERIER

På vissa modeller kan batterierna vara anslutna vid leverans, men det är ändå viktigt att kontrollera så att de är ordentligt anslutna innan ni använder er Blimo.

Börja med att lyfta av stolen om denna är placerad. Sedan kan du ta bort kåpan som senare skall täcka batterierna. På de flesta årsmodeller sitter den endast fäst med kardborreband. Börja då att dra av kåpan bakifrån sett. På andra årsmodeller finns en skruv som håller fast kåpan vilken du enkelt skruvar av för hand. Skruven sitter väl synligt mitt på kåpan.

1) Placera båda batterierna under batterikåpan.

2) Anslut batterikablarna till respektive batteripol enligt anvisning.

- 1) Skruv.
- 2) Fjäderbricka.
- 3) Planbricka.
- 4) Kabelsko till batterikabel.
- 5) Batteripol.

**Svart kabel: MINUSPOL (batteripolen är svart eller blå)**

**Röd kabel: PLUSPOL (batteripolen är röd)**

3) Säkra respektive batteri genom att spänna fast dem med kardborrebanden.

4) När alla monteringsdetaljer är monterade i korrekt ordning så drar du åt skruvarna hårt med en skiftnyckel. Täck därefter anslutningarna med den gummidamask som finns på batterikabeln.

När batterierna monterats behöver de en ordentlig första laddning, gärna 12 timmar. Därefter skall batterierna helst laddas efter varje användningstillfälle.

## MONTERINGSDETALJER



# FRIKOPPLING



Om du någon gång behöver skjuta din Blimo utan att använda motorhjälp så går det bra att försätta fordonet i friläge. Detta är användbart exempelvis om du skall rulla upp fordonet på ett släp, rulla in det i ett förråd eller om du skulle få slut på batterier och behöver rulla hem fordonet utan att bromsen är aktiverad.

För att växla mellan friläge och drivläge använder du en svart gummiklädd spak som sitter på fordonets bakaxel. Spaken är belägen en bit in under fordonet, innanför det **högra** bakhjulet, och är svart till färgen. När du vill försätta fordonet i drivläge drar du spaken nedåt. När du vill växla till friläge drar du spaken uppåt. Om du skulle starta fordonet när det är ställt i friläge kommer en varningssignal att ljuda.

**OBS: Bogsera inte fordonet i högre hastighet än 8 km/h!**



# BATTERIER OCH LADDARE

Din Blimo drivs av 2 st seriekopplade blyaccumulatorer om 12V. Batterierna är helförslutna och fordrar således inget underhåll (du behöver inte fylla på dem med batterivätska). Batterierna börjar förslitas från första användning, och tappar således räckvidd med tiden. Normal livslängd på ett batteri är från 6 månader upp till 3-4 år beroende på hur de används. Normalt byts ett batteri ut innan det är helt slutkört på grund av att den maximala räckvidden försämras med tiden.

Tänk även på att räckvidden försämras avsevärt när temperaturen sjunker. Om temperaturen på batterierna sjunker från exempelvis 20 °C till 5 °C blir räckvidden nästan halverad. Vi avråder från användning när det är kallare än -5 °C.

När det är dags att byta ut dina batterier är det viktigt att rätt modell införskaffas. Kontakta Blimo Hjälpmedel för att få rätt batterier!

Det är viktigt att tänka på att batterierna skall skötas på korrekt sätt för att inte få en onormalt snabb förslitning eller skada dem.

Om du har för avsikt att inte använda din Blimo under en längre period så skall batterierna laddas upp med 30 dagars mellanrum. Vid vinterförvaring skall batterierna förvaras i plusgrader.

## SKÖTSELRÅD FÖR BATTERIER

- 1) Ladda batterierna minst 12 timmar innan första gången du använder dem.
- 2) Ladda aldrig batterierna längre än 24 timmar i sträck.
- 3) Djupurladda aldrig batterierna, om batterierna urladdas kan de ta skada eller gå sönder.
- 4) Ladda alltid fordonet om batterikapaciteten hamnar under 20 %.
- 5) Ladda batterierna efter varje körning.
- 6) Förvara aldrig batterierna i minusgrader utan att ha dem fulladdade.
- 7) Överhätta aldrig batterierna, undvik exempelvis att ha dem i direkt solljus.
- 8) Underhållsladda batterierna vid långtidsförvaring.

## LADDARE OCH LADDNING

Laddaren till din Blimo laddar båda batterierna samtidigt, och slår om till underhållsladdning när batterierna är fulladdade. Vi rekommenderar dock inte att laddaren är ansluten mer än 24 timmar vid varje tillfälle. Fordonet skall alltid vara avstängt när det laddas. Se till att laddningen sker i en torr miljö samt i plusgrader. Laddaren kan ta skada om den utsätts för fukt!

För att ladda ska du:

- 1) Ansluta laddaren till ett jordat vägguttag.
- 2) Ansluta laddarens munstycke till laddningången på din Blimo (se översiktsbild)
- 3) Slå på laddaren med dess egna strömbrytare.


På laddaren finns två dioder som visar laddningsstatusen. När fordonet laddas skall den ena dioden lysa RÖD och den andra ORANGE. När batterierna är fulladdade skall dioderna lysa RÖD respektive GRÖN. Om den gröna dioden växlar mellan ORANGE/GRÖN så har laddaren övergått till underhållsladdning. Batterierna är således fulladdade.

Bredvid dioderna finns en säkringshållare märkt "FUSE". Om laddaren någon gång skulle sluta fungera kan man testa att byta ut säkringen. Det ingår ett par reservsäkringar vid leverans.

# ATT KÖRA DIN BLIMO

Börja med att göra dig bekant med instrumentpanelen och reglagen på din Blimo. Nedan finner du en redovisning över vilken funktion de olika reglagen har.

- |  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| 1. Tuta                                | 9. Statuslampa                        |
| 2. Blinkers                            | 10. Indikatorlampa för höger blinkers |
| 3. Backreglage                         | 11. Batteriindikator                  |
| 4. Hög- & lågläges knapp               | 12. Tändningslås                      |
| 5. Laddningsingång                     | 13. Gasreglage                        |
| 6. Indikatorlampa för vänster blinkers | 14. Framljus                          |
| 7. Strålkastarindikator                | 15. Tuta                              |
| 8. Potentiometer/hastighetsväljare     |                                       |

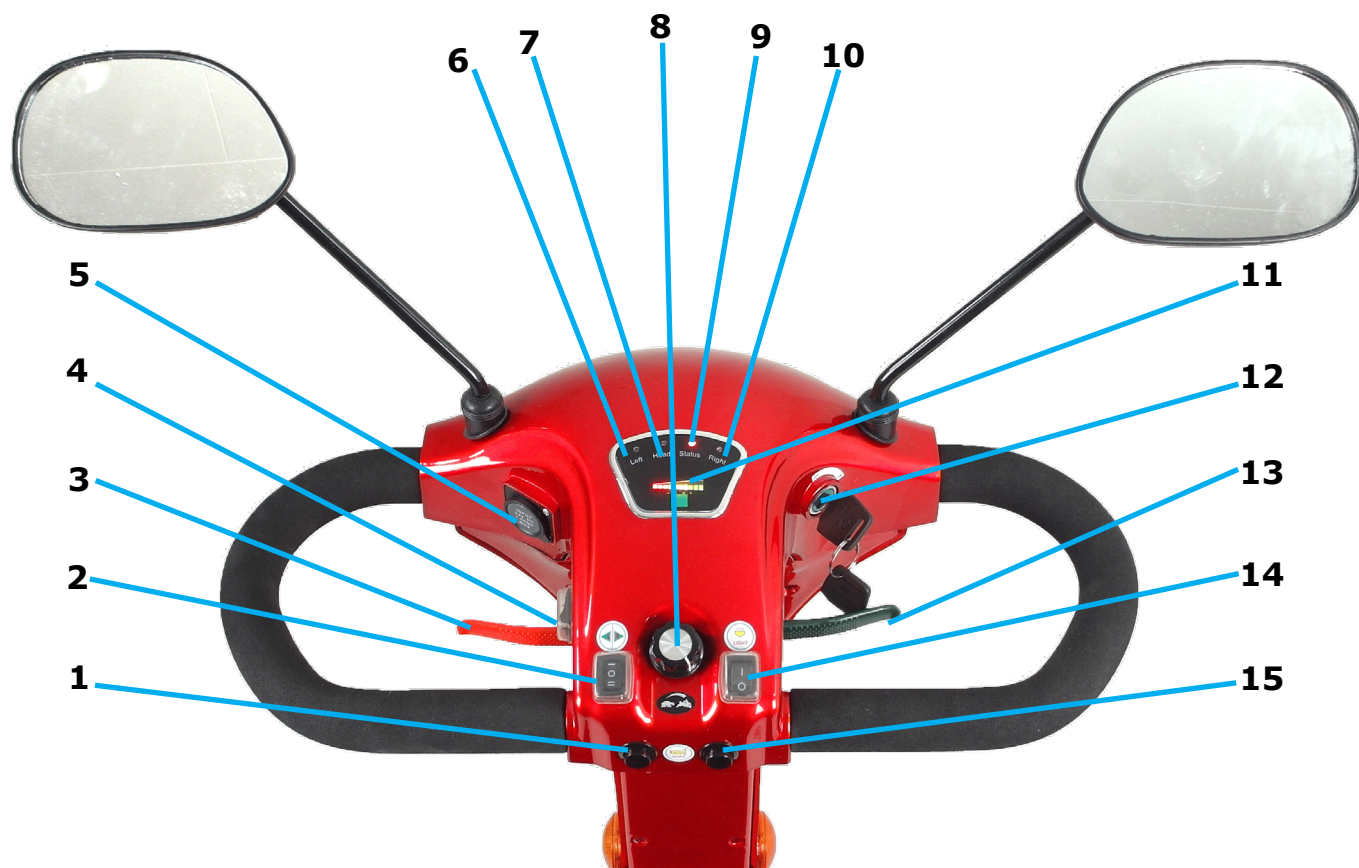

## START/STOPP

Förutom funktionerna på displayen så har din Blimo en grön och en röd spak. För att börja åka framåt trycker du ned den gröna spaken. Gasen är steglös, så ju mer du trycker in reglaget desto snabbare rör sig fordonet. För att backa så håller du istället in den röda spaken. Om du vill strypa toppfarten med reglaget för hastighetsreglering eller med reglaget för hög- och lågfart så blir även accelerationen mjukare på fordonet. Detta kan vara en god idé innan du har vant dig vid din nya promenadscooter.

Blimos promenadscooters är utrustade med s.k. elektromagnetisk broms, denna aktiveras automatiskt så fort du släpper gasreglaget.

**OBS: Undvik att släppa gasreglaget plötsligt då fordonet i sådana fall stannar mycket snabbt. Det är mycket mer behagligt att minska gasen successivt!**

## TRAFIKREGLER

En scooter från Blimo är ur ett trafikregelmässigt perspektiv att betrakta som cykel. Du får alltså framföra din Blimo överallt där det är tillåtet att cykla. Med en Blimo får du även ta dig fram där det annars endast är tillåtet att gå, exempelvis på gångvägar, trottoarer och i köpcentrum. Om du åker på dessa ytor behöver du dock hålla gångfart (ca 5-6 km/h). I trafiken skall promenadscooter framföras på höger sida och när det är mörkt ute skall lysen användas.

# INSTÄLLNINGAR

## JUSTERING AV STYRE

Styret kan regleras i två olika körställningar samt fällas ned helt. För att lossa styret viker du låsspaken rakt utåt samtidigt som du vickar på styret en aning.

OBS: Snurra ej på spaken, du skall endast dra i den. När styret har släppt sin fasta position drar du styret till den position du önskar. Ett klickljud hörs när styret åter har hittat ett fast läge.



## ARMSTÖD OCH TILLBEHÖR

Armstöden kan regleras steglöst i sidled genom att lätta på rattarna på sidan av armstöder. När du har valt önskad position så skruvar du åt rattarna så hårt som möjligt. Ratten på stolsryggen är till för att hålla fast eventuella tillbehör (exempelvis korg, släpvagn eller kryckhållare). Om något av dessa ska monteras så skall plastpluggen som finns i sitsens rör först tas bort. Efterdrag dessa skruvar när du har använt fordonet en tid för att säkerställa att de sitter fast ordentligt. Vik sedan styret i riktning mot sitsen.



## JUSTERING AV SITS

Det behövs inga verktyg för att fästa sitsen på ditt fordon. Du behöver heller inte använda verktyg om du framöver skulle vilja ta loss sitsen.

- 1) Smörj gärna in sadelstången med fett – exempelvis kullagerfett. Det blir då lättare att ta loss sitsen framöver om du t.ex. skall transportera din Blimo i en bil.
- 2) Trä på sitsen så att sadelstången hamnar i sadelfästet.
- 3) Drag i den silverfärgade spaken belägen under sitsens högra sida och håll den kvar i det läget.
- 4) Vrid och vicka på sadeln tills den når botten av sadelfästet. Ett klickljud kommer då att höras.





# UNDERHÅLL

Till skillnad från förbränningsmotorer kräver en elmotor ingen regelbunden service. Det finns dock ett fåtal punkter som vi rekommenderar att du regelbundet går igenom för att säkerställa fordonets funktion.

## RENGÖRING

Rengör fordonet och sitsen regelbundet med en fuktig trasa. Undvik att spruta vatten direkt mot fordonet då det kan tränga in i elektroniken.

## LÅNGTIDSFÖRVARING

Om du inte skall använda din Blimo under en längre tid så är det viktigt att tänka på:

- 1) Förvara fordonet i en torr miljö.
- 2) Förvara fordonet i plusgrader, annars kan batterierna förfrysas.
- 3) Ladda upp fordonet med 30 dagars mellanrum.

Det går även bra att lyfta ur batterierna ur fordonet under långtidsförvaringen. Tänk då på att ansluta en laddare med 30 dagars mellanrum. Det går bra att använda en laddare för bilbatterier och ladda batterierna individuellt.

## ANVISNINGAR FÖR BYTE AV GLÖDLAMPOR

### Byte av glödlampa/blinkers bak:

- 1) Skruva loss fästet till den glödlampa som du avser att byta från insidan av den bakre kåpan.
- 2) När du har gjort det tar du enkelt ut glödlampan och byter den.

### Byte av blinkers fram:

- 1) Skruva loss fästet till den glödlampa du avser att byta på insidan av styrstolpen.
- 2) Ta ut befintliga glödlampan och ersätt med en ny.

### Byte av främre strålkastare

- 1) Börja med att lossa skruvarna på båda sidorna av den främre strålkastaren.
- 2) Ta av den genomskinliga plastkåpan tillhörande strålkastaren.
- 2) Ta ut befintliga glödlampan och ersätt med en ny.

## ANVISNINGAR FÖR BYTE AV SÄKRINGAR

- 1) Lyft bort sitsen, batterikåpan och batterierna.
- 2) Ta bort plastmattan. Den sitter fast med kardborreband och lyfts lätt bort. På vissa BLIMO-modeller sitter batterikablarna fast. I dessa fall måste kablarna plockas bort innan du fortsätter.
- 3) Skruva bort skruvarna
- 4) Lyft försiktigt bort den bakrekåpan. Sladdarna som leder till de bakre lysena sitter fast i kåpan, var därför extra varsam när du lyfter av den.
- 5) Säkringarna finns i en kapsel fäst på batterisladden.



## ANVISNINGAR FÖR BYTE AV DÄCK & SLANG

Din Blimo är utrustad med kraftiga gummidäck samt utbytbar innerslang. Ibland kan det hända att slangen punkteras eller att däcken slits ut. Det är viktigt att du då åtgärdar detta med originaldelar för att få rätt passform, kontakta Blimo Hjälpmedel för att beställa reservdelar. En vanlig cykel- eller mopedverkstad brukar kunna utföra bytet för en liten slant om du behöver hjälp.

### Tag loss hjulet

Ställ gärna upp fordonet på en pall eller liknande så att det punkterade hjulet inte står mot marken. I hjulets centrum finns en täckkåpa som sitter fäst med två små skruvar. Skruva bort skruvarna och lyft bort locket. Nu blottas hjulmuttern som håller fast hjulet mot axeln. Lätta på den centrala muttern som håller fast hjulet mot hjulaxeln, använd gärna en hylsnyckel som greppar runt hela muttern. Därefter är hjulet löst och kan lyftas av från hjulaxeln.

### Demontera däck och slang

- 1) Pys ut eventuell luft ur slangen. Det skall inte finnas något tryck kvar när du demonterardäcket.
- 2) Skruva loss samtliga fyra muttrar på fälgens sida.
- 3) Drag fälgens sida rakt utåt så att fälgen delas i två delar.
- 4) Lyft bort däck och slang.



### Montera däck och slang

- 1) Trä slangens ventil genom fälgsidan.
- 2) Fyll på en aning luft i slangen för att försäkra dig om att den inte veckas inuti däcket.
- 3) Placera slangen i däcket. Var noga med att trycka in slangen ända in i däcket.
- 4) För ihop de två fälgsidorna med varann.
- 5) Fäst tillbaka de fyra muttrarna.
- 6) Fyll på med fullt däcktryck (3,0 bar)

**OBS: Efter att du har haft lös hjulet från fordonet eller bytt slang/däck så är det viktigt att efterdra alla hjulmuttrar efter en tids användning!**

### DÄCKTRYCK

Kontrollera att du har korrekt däcktryck **3,0 BAR** (motsvarar 3,0 kg eller 44 PSI) innan du börjar använda din promenadscooter. Om det är för lågt däcktryck så kan du pumpa däcken på en bensinstation. Om du vill ha en handpump hemma så kan du hitta en passande på närmsta cykelbutik.

Ta för vana att kontrollera däcktrycket med jämna mellanrum, ungefär en gång i månaden, då ett lågt däcktryck medför väsentligt förkortad räckvidd.

### FÖRSÄKRING OCH RAMNUMMER

Din Blimo kräver ingen trafikförsäkring för att få framföras. Om du vill försäkra fordonet mot stöld och skada kontaktar du ditt hemförsäkringsbolag och meddelar att du vill försäkra en elrullstol.

När du är i kontakt med ditt försäkringsbolag gällande din BLIMO kommer de att efterfråga fordonets ramnummer. Detta nummer finns på sidan av lådan som din BLIMO levererades i. Se till att anteckna detta nummer längst bak i manualen. Ramnumret står även på ramens ovandel under fordonets bakre kåpa. För anvisningar om bortmontering av bakre kåpa se avsnittet gällande byte av säkring.

## FELSÖKNING

<b>Problem</b>	<b>Fel</b>	<b>Lösning</b>
Din BLIMO går inte att köra. På batteriindikatorn blinkar 1 röd lampa.	Batterispänningen är för låg.	Ladda din BLIMO.
Din BLIMO går inte att köra. På batteriindikatorn blinkar 3 röda lampor och 1 gul lampa.	Motorn är frikopplad så att du kan rulla din BLIMO.	Stäng av din BLIMO. Tryck på knappen för frikoppling, alternativt dra i spaken för frikoppling. Starta din BLIMO igen
Din BLIMO går inte att köra. På batteriindikatorn blinkar 3 röda och 3 gula lampor.	Laddaren är inkopplad.	Stäng av din BLIMO. Koppla ur laddaren. Starta din BLIMO igen.
Din BLIMO går inte att köra. På batteriindikatorn blinkar 3 röda och 4 gula lampor.	Gasreglaget har använts för tidigt eller står inte i neutral-läge.	Stäng av din BLIMO. Starta den igen och vänta ca 2 sek innan du använder gasreglaget.
Din BLIMO stannar plötsligt under körning.	Dålig batteriförbindelse.	Kontrollera att batteristiften sitter fast ordentligt. Vid fortsatta problem kontakta oss.
Din BLIMO tappar fart under körning.	Glapp i hastighetsreglaget. Problemet kan uppstå om ratten används sällan.	Stäng av din BLIMO. Vrid hastighetsreglaget från låg till max ca 25 gånger. Starta din BLIMO igen.
Din BLIMO har en dålig räckvidd per laddning.	Batteriet laddas ur för snabbt.	Ladda batteriet fullt. Kör på ett hårt underlag utan många start & stop. Om problemet kvarstår skall bateriet bytas ut.
Din BLIMO vill ej ladda.	Avläsningsfel.	Du kan se din laddningsstatus på själva laddaren. Lyser laddaren rött och grönt är din BLIMO fulladdad.
Din BLIMO vill ej ladda, men går att köra.	BLIMONS huvudsäkring har gått eller så har en säkring gått i laddaren.	Kontakta oss.
Laddaren fungerar ej.	Laddaren får ingen ström.	Prova att koppla laddaren i ett annat eluttag. Kolla eventuellt laddarens säkring.
Din BLIMO kör för långsamt.	BLIMONS låga växel är aktiverad.	Tryck på knappen för hög- och lågläge.
Din BLIMOs bakljus är konstant tända.	Bakljuset är ett parkeringsljus som aktiveras automatiskt när du står stilla. När du börjar köra så släcks den automatiskt igen.	Detta är inget fel och är därför inget som behöver åtgärdas.

## KONTAKTUPPGIFTER

Adress:

BLIMO.se

Nordbutiker i Sverige

AB

Gösvägen 28

761 41 Norrtälje

Sverige

Företagsuppgifter:

Nordbutiker i Sverige

AB

Vi innehar F-skattebevis

Org.nr: 556908-9385

Telefon/E-post:

Telefon: 08-52230980

E-post: info@blimo.se

Hemsida: www.blimo.se

## RAMNUMMER

--	--	--	--	--	--	--

## Din Modell

--